

# VIBFIT

## MASAJEADOR DE PIERNAS



## MANUAL DE INSTRUCCIONES

### 4. PANEL DE CONTROL Y MANDO A DISTANCIA

- ▶ Botón de encendido (Power): presione este botón en su unidad para encenderlo y apagarlo.
- ▶ Start/Stop: Presione este botón para iniciar con sus ajustes seleccionados. Cuando el dispositivo esté en funcionamiento, presione este botón para detenerlo.
- ▶ Time-: Baja el tiempo. El tiempo predeterminado es 15 minutos, presione este botón para reducirlo.
- ▶ Time+: Incrementar el tiempo. Presione este botón para incrementar el tiempo. El tiempo máximo de los ajustes es de 30 minutos.
- ▶ Speed+: Incrementa la velocidad. La velocidad se puede ajustar.
- ▶ Speed-: Disminuya la velocidad. La velocidad se puede ajustar manualmente de 1 a 10. Presione el botón para disminuir la velocidad mientras está en funcionamiento.



5

- ▶ Mantenga el producto alejado de la humedad y la exposición al sol. No lo utilice si hay partes mojadas o húmedas.
- ▶ Mantenga el dispositivo alejado del alcance de los niños y animales
- ▶ Para evitar lesiones o daños irreparables, siempre manténgase sentado cuando use el Vibfit. Nunca se ponga de pie sobre la unidad.
- ▶ No intente desmontar o reparar el aparato. Esto sólo deben realizarse por técnicos cualificados.
- ▶ Para superficies de suelo delicadas (por ejemplo, parqué), recomendamos colocar una estera o alfombrilla debajo de la unidad para prevenir daños o decoloraciones.
- ▶ Para uso sólo en interiores.
- ▶ El dispositivo está diseñado para ser usado en las plantas de los pies, las piernas y la espalda. No lo use en la cintura, cuello u otras partes del cuerpo no descritas en este manual. No use este dispositivo para otra finalidad no especificada en este manual.

2

### 1. ADVERTENCIAS

- ▶ Guarde las instrucciones para futura referencia, Si el dispositivo se entrega a un tercero, deben entregarse también estas instrucciones.
- ▶ No utilizar directamente en la piel ya que puede producir rozaduras por fricción
- ▶ Suspenda su uso inmediatamente si nota molestias.
- ▶ No haga uso del producto antes de dormir. Puede tener un efecto estimulante y retrasar el sueño.
- ▶ Para evitar un cortocircuito, conecte el dispositivo correctamente y manténgalo alejado de metal, basura y agua.
- ▶ Use el dispositivo sobre una superficie plana. Si no está estable puede volcarse y causar lesiones.
- ▶ Desconecte el cargador del enchufe cuando no esté en uso.
- ▶ Si sospecha que hay algún problema, desconecte el dispositivo inmediatamente.
- ▶ No ponga objetos sobre el Vibfit.
- ▶ Si el cable de conexión está dañado, debe ser reemplazado. Esto sólo debe hacerse por una persona autorizada y cualificada.
- ▶ Para evitar el riesgo de descargas eléctricas no utilice el aparato con la piel mojada.

1

- ▶ Botón de programa: Puede cambiar los programas de modo manual a modo automático con este botón. Si lo presiona repetidamente, puede cambiar entre los programas HO, U1, P1, P2 y P3. Presionando el botón de programa una vez, "U1" aparecerá en la pantalla. En esta modalidad, tendrá la función de oscilación solamente y velocidad personalizable. En el programa "P1", la oscilación y la función de masaje están activas y el dispositivo ejecuta un programa con un rango de velocidades predeterminadas. No es posible cambiar la velocidad con este programa. En el programa "P2", el dispositivo alternará entre oscilación y masaje con el tiempo y velocidades predeterminados. En el programa "P3", los cabezales de acupresión se desactivan y solo la oscilación sigue activa, con la velocidad predeterminada.
- ▶ Modo manual "HO": En el modo de standby, cuando presione el botón "Start/Stop", el dispositivo pasará a modo manual, "HO" aparecerá en la pantalla. En esta modalidad, la función de oscilación y masaje funcionan de forma continua, la velocidad es personalizable.
- ▶ En el modo de standby, puede ajustar el tiempo pero no la velocidad. Una vez el dispositivo se ha puesto en marcha, puede ajustar la velocidad pero no el tiempo.
- ▶ Nota: Presionando el botón P en el dispositivo varias veces, también puede cambiar al modo manual "HO".
- ▶ Presionando el botón "P" en el dispositivo varias veces, también puede cambiar al modo manual "HO".
- ▶ Puede seleccionar la modalidad "P" (Auto Program) después de encender el dispositivo, presione "Start/Stop" para activarlo.

6

### 2. PUESTA EN MARCHA Y USO


1. Conecte el cargador al enchufe y el cable a la unidad. En cuanto esté enchufado, oirá un pitido y la pantalla se iluminará.
2. Una vez enchufado, gírelo de forma que el panel de control esté hacia delante. Seleccione un modo en función de sus necesidades utilizando el mando a distancia o los botones del aparato. Su configuración se mostrará en la pantalla. Para empezar, pulse el botón Start/Stop del mando a distancia del dispositivo.
3. Para apagar correctamente el Vibfit, primero debe detener el dispositivo pulsando el botón de Start/Stop del aparato o del mando a distancia. A continuación, pulse el botón de encendido del dispositivo para apagarlo completamente.
4. Desenchufe el aparato cuando haya terminado de utilizarlo.

3

### 3. POSTURA CORRECTA PARA EL USO

Coloque la planta del pie o la pantorrilla sobre el aparato. Para el uso del dispositivo en la zona de la espalda, colóquelo a la altura de ella y apóyese sobre él.

Nota: Nunca ponga su peso completo sobre el dispositivo, ya que puede dañarlo.

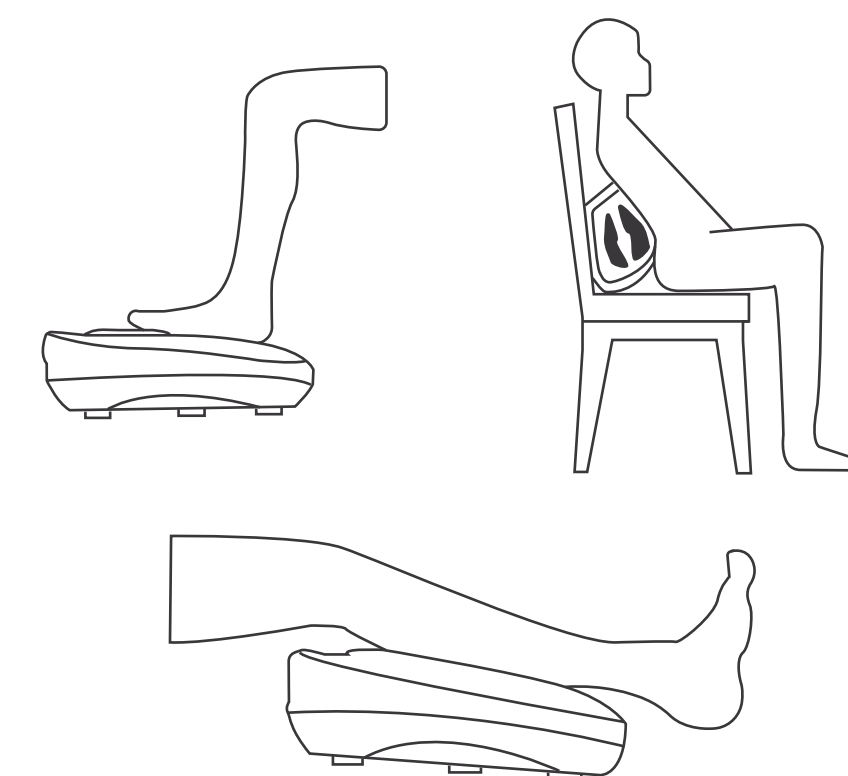

4

► Detenga el Vibfit presionando primero el botón "Start/Stop". Luego apague la unidad con el botón de encendido o presione "Start/Stop" para continuar con el masaje.

► En el programa P3, los cabezales giratorios de acupresión se detendrán en cuanto coloque sus pies en el dispositivo. Esto no es un defecto.



7

## 5. PROGRAMAS P1, P2, P3 Y EL MODO MANUAL

PROGRAMA AUTOMÁTICO P1	
Función	Rango De Velocidad (Cambios por minuto)
Oscilación y acupresión	1-2-3-4-5-6-7-8-5-3-1-3-5-8-3

PROGRAMA AUTOMÁTICO P2		
Tiempo estándar	Función	Nivel de velocidad
Minuto 1	Oscilación y acupresión	Nivel 1
Minuto 2	Oscilación sólo	Nivel 3
Minuto 3	Oscilación y acupresión	Nivel 5
Minuto 4	Oscilación sólo	Nivel 7
Minuto 5	Oscilación y acupresión	Nivel 9
Minuto 6	Oscilación sólo	Nivel 10
Minuto 7	Oscilación y acupresión	Nivel 8
Minuto 8	Oscilación sólo	Nivel 6
Minuto 9	Oscilación y acupresión	Nivel 4
Minuto 10	Oscilación sólo	Nivel 2
Minuto 11	Oscilación y acupresión	Nivel 1
Minuto 12	Oscilación sólo	Nivel 4
Minuto 13	Oscilación y acupresión	Nivel 8
Minuto 14	Oscilación sólo	Nivel 6
Minuto 15	Oscilación y acupresión	Nivel 4

8

PROGRAMA AUTOMÁTICO P3	
Función	Rango De Velocidad (Cambios por minuto)
Oscilación sólo	3-5-7-9-2-4-6-8-10-1-5-10-5-1-5

MODO MANUAL "HO"	
Función	Descripción
Oscilación y acupresión	La velocidad es personalizable

MODO MANUAL "UI"	
Función	Descripción
Oscilación sólo	La velocidad es personalizable

## 6. MANTENIMIENTO

- Siempre desconecte el enchufe antes de limpiar.
- Limpie el dispositivo y las bases de silicona con un trapo húmedo y jabón neutro. No utilice productos de limpieza abrasivos o corrosivos. Las almohadillas de silicona pueden retirarse para facilitar la limpieza.
- Nunca deje que el aparato entre en contacto con agua u otros líquidos.
- Guarde el Vibfit en su embalaje original si va almacenarlo por un tiempo prolongado, o en un lugar seguro, fresco y seco.

9

## 7. ESPECIFICACIONES

VIBFIT	
Potencia máxima	30 W
Input	100-240V, 50/60Hz
Output	24V 1500mA
Medidas	40.5X39.5X12.5 cm
Peso neto/Peso bruto	4.2 kg/5.3 kg



Este artículo no es un producto sanitario ni está destinado al tratamiento o prevención de enfermedades.



Lea las instrucciones antes de usar el producto.

10