



MODELO ÍTACA ADULTS



0101 blanco

0000 negro



- ✓ Reutilizable/Lavable
- ✓ Evita la propagación del virus
- ✓ No irrita la piel

Powered by:
regenactiv®

Nº Licencia Sanitaria 5947-PS
Producto Sanitario Clase I



Made in Spain

VITALVIA TE RECOMIENDA



Lavarse las manos frecuente-
mente con agua y jabón o gel
hidroalcohólico



Mantener la distancia de seguri-
dad entre otras personas mínima
de 1,5 a 2m



En caso de no llevar protección,
cubrirse la nariz y boca con el
codo o un pañuelo de un solo
uso al toser o estornudar



Evitar tocarse ojos, nariz y boca ya
que las manos facilitan la transmi-
sión de enfermedades y virus

CERTIFICADOS



COMPOSICIÓN: 40% Viscosa C H, 45% Poliamida Ag, 15% Elastano

TALLA (ADULTO)

ÚNICA

TALLA (KIDS)

Edad 3-7

Edad 8-12

Nº Licencia Sanitaria 5947-PS
Producto Sanitario Clase I



MLS TEXTILES 1992, S.L.
NRI: 46/64675 - CIF: B46481644
C/ Diables, 34 Polígono Industrial El Pla
46870 ONTINYENT - Valencia (Spain)



MADE IN SPAIN



MODELO ÍTACA KIDS



0101 blanco

0000 negro



- ✓ Reutilizable/Lavable
- ✓ Evita la propagación del virus
- ✓ No irrita la piel

Powered by:
regenactiv®

Nº Licencia Sanitaria 5947-PS
Producto Sanitario Clase I



Made in Spain

CARACTERÍSTICAS

95

Eficacia de la filtración bacteriana $\geq 95\%$, según la norma EN14683:2019



Acelera el proceso de recuperación de la piel



Reutilizable



Reduce y evita la irritación dérmica



Acción antifúngica y antibacteriana (características testadas en más de 135 lavados)



Alta transpirabilidad



Control del exceso de humedad



Máximo confort y adaptabilidad



Tejido suave y agradable al tacto

CONSIDERACIONES DE USO

• Población general:

El uso de la máscara Ítaca reduce y evita la propagación del virus.

• Uso profesional (sanitarios, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, etc)

Uso complementario a otros equipos de protección individual:

· Evita el contacto directo de mascarillas o distintos tipos de protección, previniendo lesiones y alteraciones cutáneas.

· Recupera la piel en caso de pérdida de integridad cutánea.

• Antes de su utilización:

Lávate las manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico

• Modo de colocación:

Colócate la mascarilla evitando el contacto con la parte central.

Ajusta la banda por debajo de las orejas y la parte central por debajo de los ojos y barbilla, cubriendo totalmente nariz y boca.

Evita tocarte la máscara durante su uso.

• Después de cada uso:

Lávate las manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico antes de manipularla.

Retírate la máscara por detrás sin tocar la parte central.

Lava la máscara a una temperatura máxima de 60°C a mano o a máquina.*

Lávate de nuevo las manos con agua y jabón o gel hidroalcohólico.

* Se puede esterilizar en autoclave vapor presión a 121°C



TECNOLOGÍA[®]


regenactiv



regenactiv[®]

VISCOSA CH

Hilado protector de origen marino, natural y biodegradable.

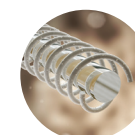

SILVER
BASE
LAYER

POLIAMIDA ION

Hilado antibacteriano aditivado con partículas iónicas de plata.

La Máscara ITACA está elaborada con la novedosa Tecnología Regenactiv[®] (textil patentado) basada en la interacción de dos hilos tejidos entre sí. Un hilado principal, natural y biodegradable, de viscosa absorbente con partículas de quitina entrelazado con un segundo hilado de poliamida ionizada con plata sobre hilo de elastano.

Esta novedosa y exclusiva combinación, en contacto con la piel, ayuda a mantener la integridad de la barrera cutánea, conservando su estado fisiológico natural y favoreciendo su recuperación ante agresiones externas.

BENEFICIOS EN EL CUIDADO DE LA PIEL

· Acción reepitelizante y regeneradora de la epidermis.

· Efecto antiinflamatorio y calmante.

· Efecto cicatrizante de pequeñas lesiones, así como de microheridas.

· Acción antimicrobiana duradera previniendo así el sobrecrecimiento de hongos y bacterias.